



RELAXAN 140 podkolanówki z piętą I KL.

Cena: 38,26 zł

Opis słownikowy

Producent	Nieznany producent
Rejestracja	Wyrób medyczny inny

Opis produktu

opis produktu:

Uniwersalne podkolanówki przeciw?ylakowe o stopniowanym ucisku z cienkiej, transparentnej dzianiny 140 DEN RelaxSan Basic. 1 klasa ucisku - 18-22 mmHg - lekka kompresja. Posiadaj? wzmocnion? **pi?t?, stop? oraz palce**. Polecane dla osób z pierwszymi problemami kr??enia ko?czyn dolnych, przy podró?ach, siedz?cym trybie ?ycia oraz wszystkim, którzy chc? zadba? o zdrowe nogi.

Zalecane dla osób, które odczuwaj? pierwsze symptomy choroby ?ylakowej, **takie jak ci??ko??, ból, obrz?ki nóg**, zw?aszcza pod koniec dnia. Dzi?ki stopniowanemu uciskowi, który jest najwi?kszy w kostce i stopniowo zmniejszaj?cemu si? ku górze, przep?yw krwi w ko?czynach usprawnia si?. Zwi?ksza si? ci?nienie krwi, co zapobiega zaleganiu jej, co z kolei przeciwdzia?a obrz?kom, bólowi oraz zmianom ?ylakowym. Terapeutyczne dzia?anie jest odczuwane ju? przy pierwszym u?yciu, a regularnie stosowane pomagaj? zapobiega? przewlek?ej niewydolno?ci ?ylnej.

Sk?ad:

75% Poliamid

25% Elastan

Dla kogo s? te podkolanówki? S? przeznaczone dla osób:




- Które odczuwają łagodne, lecz powtarzające się objawy niewydolności żyłnej: męczliwość, ciężkość, czy ból nóg
- Mają tendencje do obrzęków w okolicach kostki
- Zaobserwowały na nogach pajęczaki naczyńiowe lub niewielkie żyłaki bez obrzęków
- Są w ciąży i mają żyłaki w początkowym stadium (bez obrzęków)
- Potrzebują stosować profilaktykę pod kątem zakrzepicy lub zatorowości żył głębokich
- Prowadzą siedzący lub stojący tryb życia
- Odbывают długie podróże powodujące unieruchomienie kończyn na dłuższy okres
- Nie zaobserwowały niepokojących objawów ale należą do grupy osób o podwyższonym ryzyku wystąpienia choroby żyłnej

Cechy:

- ucisk w kostce 18 - 22 mmHg - 1 klasa - ucisk lekki
- elastyczne włókna w podwójnym oplocie tworzące dzianinę o strukturze "plastra miodu"
- grubość dzianiny 140 DEN - cienka, transparentna
- linia RelaxSan Basic

Jak dobrać rozmiar?

TABELA ROZMIARÓW	1	2	3	4	5
WZROST (CM)	154-162	158-166	162-174	166-182	174-190
WAGA (KG)	43-53	48-63	58-73	63-83	68-93
OBWÓD W KOSTCE (cm)	18-20,5	20,5-23	23-25,5	25,5-28	28-30,5

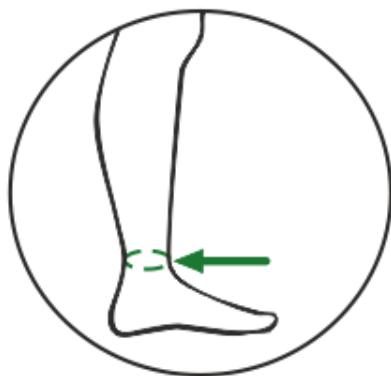

! Obwód w kostce należy zmierzyć
w najwęższym miejscu nad kostką

Jak nosić podkolanówki?

- Podkolanówki powinno się nosić codziennie, aby odczuć ich terapeutyczne efekty.
- Zakładać wyrób rano, przed wstaniem z łóżka kiedy nogi są wypoczęte lub po kilkunastominutowym odpoczynku z nogami górze.
- Przed założeniem bezwzględnie zdjąć pierścionki i biuterię z rąk aby uniknąć zaciśnięcia i uszkodzenia podkolanówek
- Przy zakładaniu zwrócić uwagę na poprawne dopasowanie palców i piąty do stopy oraz rozprowadzenie wyrobu na kośćczyne.
- Podkolanówki zdjąć przed snem.

Jakie są przeciwwskazania?



- Niedrożność żył lub tętnic obwodowych
- Niewyrównana niewydolność serca
- Septyczne zapalenie żył
- Obrzęk siniczny
- Stany zapalne skóry
- Nietolerancja materiału

Jak prać?

- Prać ręcznie
- Do prania stosować delikatne środki piorące np. szare mydło
- Suszyć produkt w pozycji rozłożonej w temperaturze pokojowej
- Nie suszyć na słońcu, w suszarce ani na kaloryferze - grozi to uszkodzeniem włókien co wyklucza efektywną kompresję
- Nie czyścić chemicznie, nie chlorować, nie prasować