



apteka  
w sieci

# TEST G1 Szybki test antygenowy na Gardnerella Vaginalis x 1 szt.

Cena: 52,18 zł



## Opis słownikowy

Producent	FARMABOL
Rejestracja	Wyrób medyczny inny

## Opis produktu

### Postać

Test

### Opakowanie


Próbówka, zakraplacz, miseczka, kasetka testowa, instrukcja użycia.

### Opis

Test antygenowy **TEST G1** dla kobiet i mężczyzn przeznaczony do samodzielnego wykonania w domu, służący do wykrywania antygenów *Gardnerella vaginalis*. Do badania wykorzystuje się próbkę moczu, najlepiej porannego, gdyż wtedy stężenie bakterii jest największe.

Bakteria *Gardnerella vaginalis* należy do grupy beztlenowców i powoduje szereg nieprzyjemnych objawów, takich jak charakterystyczny, przykry „rybi” zapach z dróg płciowych kobiety, pieczenie czy świąd. W wielu przypadkach jednak, zakażenie przebiega w sposób bezobjawowy, co może wpływać na nieświadome zarażanie kolejnych osób.

Nieleczenie infekcji *Gardnerella vaginalis* może powodować nieprzyjemne powikłania, szczególnie u kobiet w ciąży. Do jednych z tych powikłań należą m.in. zapalenie miednicy mniejszej, przedwczesne pęknięcie pęcherza płodowego lub poronienia. Innymi skutkami zakażenia są również zapalenie błony śluzowej macicy, zapalenia szyjki macicy i zapalenie przydatków.

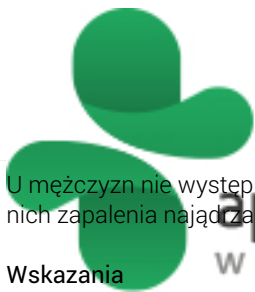

U mężczyzn nie występują typowe objawy zakażenia, ale mogą oni być nosicielami *Gardnerella vaginalis*. Zakażenie może wywoływać u nich zapalenia najądrza, zapalenie gruczołu krokowego, a także bezpłodność.

#### Wskazania

Test antygenowy na *Gardnerella vaginalis* przeznaczony jest do jakościowego wykrycia antygenów *Gardnerella vaginalis* w moczu. Samokontrola wskazana jest szczególnie:

- kobietom w ciąży,
- przed porodem,
- wszystkim osobom prowadzącym bogate życie intymne,
- często podróżującym,
- korzystającym z publicznych basenów, toalet.

#### Uwagi

Nie należy pobierać próbek moczu zawierających krew, gdyż może to wpłynąć na wynik testu. Kasetkę testową należy wykorzystać w ciągu 1 godziny po otwarciu opakowania aby zapobiec wpływowi wilgoci na dokładność testu. Próbkówka zawiera neutralny bufor. Jeśli dostanie się do oczu lub na skórę, należy przemyć obszar wodą z kranu przez 1 do 2 minut, aby uniknąć możliwych alergii. Nie jest konieczne mocne mieszanie próbki moczu z zawartym w niej buforem w próbkówce. Jeśli na powierzchni cieczy unosi się zbyt wiele bąbelków; po wymieszaniu odstawić próbkówkę na 3 do 5 minut, w celu zniknięcia pęcherzyków, a następnie dopiero przystąpić do testu.

#### Sposób użycia

1. Zebrać mocz do pojemnika na mocz.
2. Otworzyć fioletową nakrętkę próbkówki.
3. Pobrać 0,5ml moczu zgodnie z oznaczeniem skali na górze zakraplacza.
4. Dodać mocz do próbkówki z fioletową nakrętką zawierającą 0,5ml buforu.
5. Zamknąć nakrętkę i dobrze wymieszać przez około 5-6 sekund.
6. Wyjąć kasetkę testową z woreczka foliowego. Nie używać po godzinie po otwarciu woreczka foliowego.
7. Zdjąć bezbarwną końcówkę fioletowej nakrętki.
8. Umieścić 3-4 krople mieszanki moczu w obszarze „S”kasetki testowej.
9. Poczekać 15 minut na wyniki.

#### Odczytywanie wyników

Należy zapoznać się z instrukcją obsługi dołączonej do opakowania.